


The background of the entire page is a teal color. In the center, there is a large, semi-transparent image of two hands wearing white medical gloves, with the fingers interlaced. The Mercator logo is positioned in the top left corner.

MERCATOR

CATALOGO DI GUANTI DA ESAME E PROTETTIVI

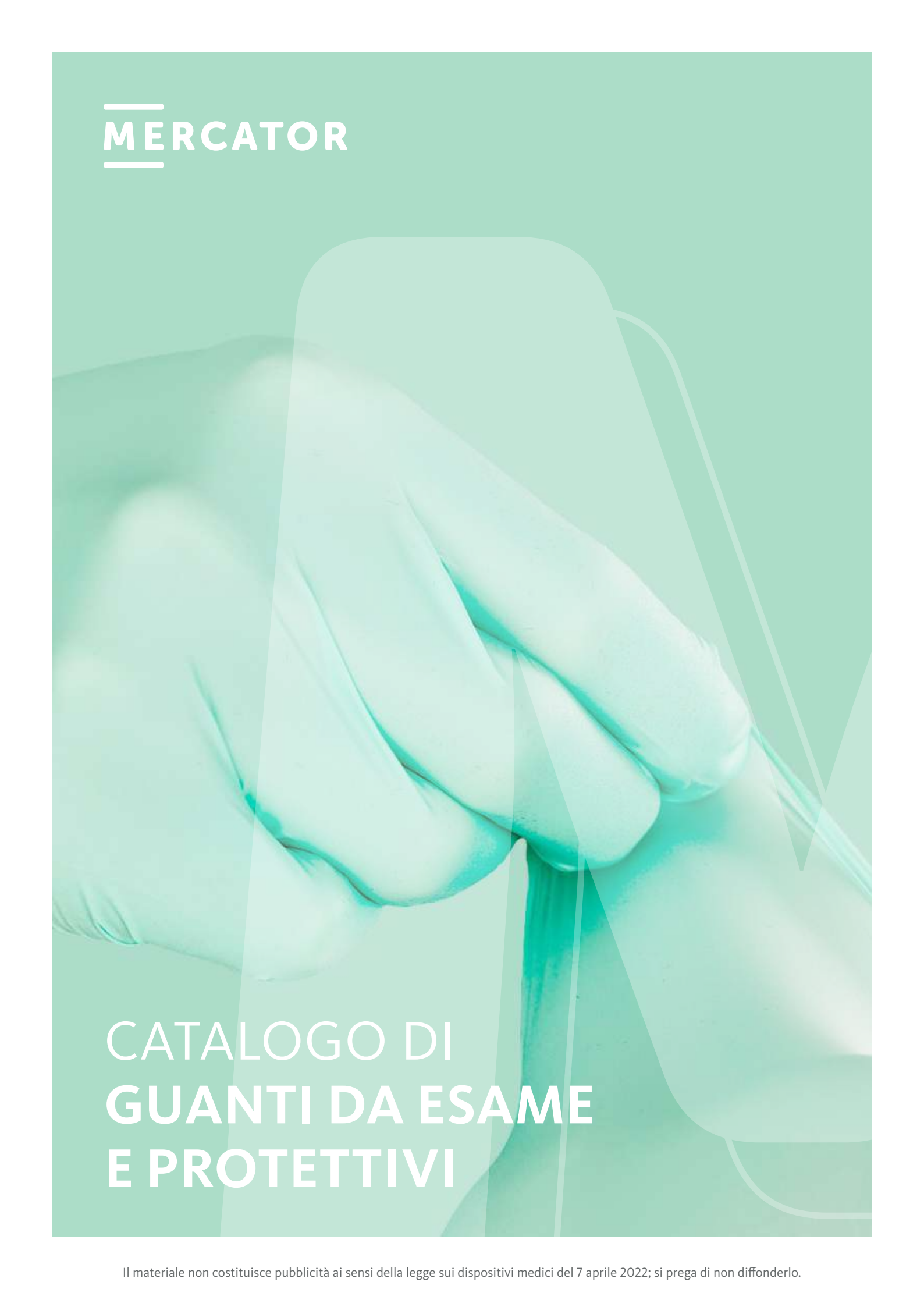

MERCATOR

DOVE SI USANO I GUANTI MERCATOR?

Nel settore medico e nei servizi correlati, i guanti monouso sono un mezzo essenziale per lavorare in sicurezza.

USO PREVISTO:

Guanti da esame e protettivi monouso, non sterili, destinati all'uso medico per proteggere il paziente e l'utilizzatore da infezioni crociate, prevenire infezioni perioperatorie durante procedure mediche (ad esempio iniezioni endovenose, intramuscolari, intra-arteriose, cambio di medicazioni, revisione di ferite, rimozione di punti di sutura chirurgici), per l'esecuzione di esami medici e procedure terapeutiche, per l'esecuzione di procedure diagnostiche e terapeutiche, per la manipolazione di materiali medici contaminati, destinati all'uso su una sola persona durante un unico intervento.



OSPEDALI



AMBULATORI
DI SPECIALISTI



CENTRI DI
CONSULENZA
E AMBULATORI



CASE
DI CURA



VETERINARIA



FISIOTERAPIA



MEDICINA
ESTETICA



ODONTOIATRIA



LABORATORI



FARMACIE



GROSSISTI DI
PRODOTTI MEDICI

IN THE HANDS OF HEROES

nitrilex classic



INDICE

01	COMPENDIO DI CONOSCENZE SUI GUANTI DA ESAME	07
02	GUANTI STANDARD	15
03	GUANTI SPECIALI	21
04	GUANTI COLORATI E SUPPORTI	29



01

**COMPENDIO
DI CONOSCENZE**
SUI GUANTI DA ESAME





RICHIAMO

L'obbligo del datore di lavoro, definito nel capitolo IX della legge del 26 giugno 1974 Codice del lavoro (Gazzetta Ufficiale 1974 n. 24 pos. 141), è quello di fornire gratuitamente al dipendente mezzi di protezione individuale efficaci e adeguati al tipo di rischio.



PRINCIPI FONDAMENTALI DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Le mani sono la principale via di trasmissione dei microrganismi. Per prevenire le infezioni nelle strutture che forniscono servizi medici, è necessario rispettare le procedure e gli standard igienici adeguati. L'uso di guanti monouso adeguati al tipo di attività svolta non solo costituisce l'adempimento degli obblighi del datore di lavoro, che derivano direttamente dal Codice del Lavoro, ma soprattutto influisce sulla sicurezza del personale.

GUANTI MONOUSO

I guanti monouso sono prodotti protettivi di uso comune e molto apprezzati. I microrganismi: batteri, bacilli, funghi e virus rappresentano i principali pericoli nell'ambiente medico. Il rispetto delle norme igieniche di base per le mani, insieme all'uso di guanti adeguati al tipo di pericolo, protegge sia l'utilizzatore che il paziente.

La qualità dei guanti e le loro caratteristiche sono regolate da linee guida rigorose e dettagliate definite da regolamenti e norme specifici.

PERCHÉ I GUANTI SONO IMPORTANTI?

Nel settore medico, esposto a numerosi rischi biologici e chimici, i guanti monouso consentono di lavorare in sicurezza. La loro funzione principale è quella di proteggere il personale e il paziente dalle infezioni e dal contatto con preparati pericolosi.

nitrilex complete

COME SCEGLIERE CORRETTAMENTE I GUANTI?

- 01

Identificare l'area di applicazione.
- 02

Identificare il rischio di contatto con materiale biologico.
- 03

Identificare il rischio di esposizione ai virus.
- 04

Identificare i rischi di contatto con le sostanze chimiche, compresi i detergenti e i disinfettanti.
- 05

Identificare il potenziale contatto con gli alimenti.
- 06

Determinare il rischio di ipersensibilità o reazioni allergiche alle proteine del lattice o agli acceleranti chimici.
- 07

Dopo aver determinato i requisiti, selezionare i guanti in base alla tabella assegnata all'offerta di prodotti. È importante proteggere non solo le mani, ma anche i polsi; a tal fine, si possono utilizzare guanti con polsino allungato.
- 08

Non dimenticare di scegliere la taglia giusta per garantire il comfort nell'uso dei guanti e la precisione nelle attività manuali.

I VANTAGGI DI UNA CORRETTA SCELTA DEI GUANTI

I guanti scelti correttamente, adatti all'utente, alle condizioni di lavoro che tengono conto dei fattori di rischio e alle procedure correttamente organizzate sono il modo più efficace per garantire un livello adeguato di sicurezza e igiene sul lavoro, auspicabile sia per la necessità di rispettare le normative vigenti nel settore e le aspettative sociali, sia per la possibilità di ottenere effetti positivi per l'organizzazione.

RICHIAMO



Non utilizzare guanti quando si entra in contatto con oggetti personali.



I guanti sono un prodotto monouso. **Non disinfettare i guanti: non è consentito.**



Prima e dopo aver indossato i guanti, disinfettare sempre le mani. Se necessario, lavare le mani. Seguire le linee guida dell'OMS.



Utilizzare almeno un paio di guanti monouso per ogni procedura. Dopo averli rimossi, smaltirli secondo le procedure locali.



Evitare il contatto dei guanti con superfici di uso comune (ad esempio maniglie, corrimano) per eliminare il rischio di contaminazione incrociata.

AMPIO UTILIZZO DEI GUANTI DA ESAME E PROTETTIVI

A seconda dell'uso previsto, i guanti possono essere classificati in due modi: come dispositivi medici e come dispositivi di protezione individuale, oppure singolarmente come dispositivi medici o come dispositivi di protezione individuale.



GUANTI MEDICI

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ SECONDO IL **REGOLAMENTO 2017/745 SUI DISPOSITIVI MEDICI**

CLASSE I	Guanti da esame
CLASSE I STERILE	Guanti da esame sterili
CLASSE IIA	Guanti chirurgici



GUANTI PROTETTIVI

VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ SECONDO IL **REGOLAMENTO 2016/425 SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

CATEGORIA I	Per la protezione contro i pericoli con rischio minimo
CATEGORIA II	
CATEGORIA III	Tipo A
	Tipo B
	Tipo C

CODIFICA DELLE TAGLIE CON COLORI

Il sistema KRK è stato creato per facilitare agli utenti l'identificazione della taglia corretta indipendentemente dalla marca del prodotto. La striscia colorata riportata sulla confezione singola indica la taglia specifica del guanto. Si raccomanda di selezionare la taglia appropriata per garantire il comfort durante l'uso dei guanti.



SIGNIFICATO DEI PITTOGRAMMI SULLE CONFEZIONI DI GUANTI DA ESAME E PROTETTIVI

PITTOGRAMMI NORMATIVI

	dispositivo medico
	prodotto monouso
	prodotto non sterile
	la qualità dei guanti non è garantita se l'imballaggio è danneggiato
	proteggere dalla luce solare
	proteggere dall'umidità
	conservare a una temperatura specifica
	guanti in lattice naturale, possono causare reazioni allergiche
	codice di lotto del produttore
	numero di catalogo
	rappresentante autorizzato nell'Unione Europea
	importatore
	distributore
	data di scadenza
	data di produzione
	produttore (il simbolo deve essere accompagnato dal nome e dall'indirizzo del produttore)
	marchio CE
	si prega di leggere le istruzioni
	prodotto adatto al contatto con gli alimenti
	riciclabile - cartone ondulato
	riciclabile - carta
	gli imballaggi possono essere trattati come rifiuti domestici

PITTOGRAMMI NORMATIVI - RELATIVI ALLE PROVE DI RESISTENZA A SOSTANZE CHIMICHE, BATTERI, FUNGHI E VIRUS

				
UVWXYZ	XYZ			VIRUS
TIPO A: Massima protezione contro le sostanze chimiche	TIPO B: Elevata protezione contro le sostanze chimiche	TIPO C: Protezione di base contro le sostanze chimiche	Protezione contro batteri e funghi	Protezione contro batteri, funghi e virus

PITTOGRAMMI AGGIUNTIVI

	guanti in nitrile
	guanti in cloruro di polivinile
	marcatura dei guanti con polvere
	marcatura dei guanti senza polvere
	marcatura dei guanti rivestiti internamente con uno strato polimerico
	sistema di confezionamento speciale per limitare la contaminazione
	guanti prodotti con la tecnologia brevettata LOW DERMA™, con esito positivo nei test clinici, raccomandati per allergici e persone con pelle sensibile delle mani
	marcatura di prodotto a sostegno della riforestazione del pianeta
	dispositivo di protezione individuale
	numero di pezzi per confezione in base al peso
	informazioni aggiuntive all'interno della confezione



LATTICE

Hevea brasiliensis è un albero dal quale si ricava il lattice di gomma e, dopo un’adeguata lavorazione, il succo lattiginoso utilizzato per la produzione del lattice.

Attualmente, il 90% della produzione mondiale di lattice proviene dall’Asia.

Questa materia prima è ampiamente utilizzata nell’industria, tra l’altro per la produzione di guanti monouso.

- I guanti in lattice hanno le seguenti caratteristiche:**
- elasticità e morbidezza,
 - resistenza e comfort,
 - eccellente sensibilità tattile, che offre all’utente una sensazione di “seconda mano”.

Il lattice con cui sono prodotti i guanti è una materia prima naturale.

Le proteine contenute nel lattice possono causare allergie di tipo I, pertanto il materiale non è raccomandato per le persone soggette ad allergie.

NITRILE

Il nitrile, gomma nitrile butadiene (NBR), è un materiale ottenuto da sostanze chimiche organiche. Il processo di produzione di questa materia prima è stato modificato in modo da poter competere con la gomma naturale.

I guanti in nitrile sono un’alternativa ideale ai guanti in gomma naturale.

- Guanti in nitrile:**
- non contengono proteine del lattice e sono sicuri per le persone allergiche al lattice,
 - hanno un contenuto minimo di acceleranti chimici di vulcanizzazione,
 - hanno buone proprietà barriera per le sostanze chimiche.

Il contenuto ridotto al minimo di acceleratori chimici limita significativamente il rischio di allergie di tipo IV.

VINILE

Il vinile è uno dei tipi di materiale PVC. Grazie alle sue proprietà, il cloruro di polivinile (PVC) trova ampio impiego in molti settori industriali.

I guanti in vinile sono delicati per la pelle degli utenti con tendenza alle allergie di tipo I e IV.



dermagel coated

02

GUANTI STANDARD



dermagel coated
comfort powder-free
santex powdered
nitrylex classic
nitrylex basic
vinylex powder-free

dermagel coated



Specifiche:

- REF

RD100060 01-05
- Superficie esterna: **strutturata**
- Crema**
- Imballaggio unitario: **100 pezzi**
Scatola (collettiva): **10 x 100 pezzi**
- In lattice, senza polvere, monouso, non sterile.
Si caratterizzano per **la facilità di applicazione.**
- XS

S

M

L

XL



Aree di applicazione consigliate:



LQA		1.5
MD - dispositivo medico		classe I
DPI - dispositivi di protezione individuale		Categoria III, tipo C
Resistenza	batteri e funghi	✓
	virus	✓
	sostanze chimiche*	✓
	citostatici*	✗

* Leggere il rapporto di ricerca dettagliato

comfort powder-free



Specifiche:

- REF

RD100050 01-05
- Superficie esterna: **testura sulle punte delle dita**
- Giallo chiaro**
- Imballaggio unitario: **100 pezzi**
Scatola (collettiva): **10 x 100 pezzi**
- In lattice, senza polvere, monouso, non sterile.
Riduzione dei residui proteici e chimici.
- XS

S

M

L

XL



Aree di applicazione consigliate:



LQA		1.5
MD - dispositivo medico		classe I
DPI - dispositivi di protezione individuale		Categoria III, tipo B
Resistenza	batteri e funghi	✓
	virus	✓
	sostanze chimiche*	✓
	citostatici*	✓

* Leggere il rapporto di ricerca dettagliato

santex powdered



Specifiche:

- REF

RD112570 01-05
- Superficie esterna: **tessitura sulle punte delle dita**
- Crema**
- Imballaggio unitario: **100 pezzi**
Scatola (collettiva): **10 x 100 pezzi**
- In lattice, con polvere, monouso, non sterile.
Unici guanti con polvere. Sensazione di minore sudorazione delle mani durante l'utilizzo dei guanti.
- XS

S

M

L

XL



Aree di applicazione consigliate:



LQA		1.0
MD - dispositivo medico		classe I
DPI - dispositivi di protezione individuale		Categoria III, tipo C
Resistenza	batteri e funghi	✓
	virus	✓
	sostanze chimiche*	✓
	citostatici*	✗

* Leggere il rapporto di ricerca dettagliato



nitrylex classic



Specifiche:

- REF

RD300190 01-05 - 100 pezzi
RD300960 01-05 - 200 pezzi
- Superficie esterna: **tessitura sulle punte delle dita**
- Azzuro**
- Imballaggio unitario: **100 pezzi / 200 pezzi**
Scatola (collettiva): **10 x 100 pezzi/ 10 x 200 pezzi**
- In nitrile, senza polvere, monouso, non sterile.
Un classico dei guanti in nitrile.
- XS

S

M

L

XL



Aree di applicazione consigliate:

- AMBULATORI
SPECIALISTICI
- ASSISTENZA
INFERMIERISTICA
- LABORATORI
- CONTATTO
CON SOSTANZE
CHIMICHE
SELEZIONATE
- CONTATTO CON
GLI ALIMENTI

LQA		1.0
MD - dispositivo medico		classe I
DPI - dispositivi di protezione individuale		Categoria III, tipo B
Resistenza	batteri e funghi	✓
	virus	✓
	sostanze chimiche*	✓
	citostatici*	✓

* Leggere il rapporto di ricerca dettagliato

nitrylex basic



Specifiche:

- REF

RD301050 01-05
- Superficie esterna: **tessitura sulle punte delle dita**
- Blu scuro**
- Imballaggio unitario: **100 pezzi**
Scatola (collettiva): **10 x 100 pezzi**
- In nitrile, senza polvere, monouso, non sterile.
Colore opaco intenso.
- XS

S

M

L

XL



LQA		1.5
MD - dispositivo medico		classe I
DPI - dispositivi di protezione individuale		Categoria III, tipo B
Resistenza	batteri e funghi	✓
	virus	✓
	sostanze chimiche*	✓
	citostatici*	✗

* Leggere il rapporto di ricerca dettagliato

Aree di applicazione consigliate:

- AMBULATORI
SPECIALISTICI
- ASSISTENZA
INFERMIERISTICA
- LABORATORI
- IGIENE
E ATTIVITÀ
SANITARIE
- CONTATTO CON
GLI ALIMENTI

vinylex powder-free



Specifiche:

- REF

RD200180 01-05
- Superficie esterna: **liscia**
- Trasparente**
- Imballaggio unitario: **100 pezzi**
Scatola (collettiva): **10 x 100 pezzi**
- In vinile, senza polvere, monouso, non sterile.
Riduzione del rischio di allergie legate all'uso dei guanti
- XS

S

M

L

XL




LQA		1.5
MD - dispositivo medico		classe I
DPI - dispositivi di protezione individuale		Categoria III, tipo B
Resistenza	batteri e funghi	✓
	virus	✓
	sostanze chimiche*	✓
	citostatici*	✗

* Leggere il rapporto di ricerca dettagliato

Aree di applicazione consigliate:

- TRASPORTO
DEI PAZIENTI
- IGIENE
E ATTIVITÀ
SANITARIE
- VETERINARIA
- CONTATTO CON
GLI ALIMENTI
- LAVORI DI
ASSEMBLAGGIO
MINORI

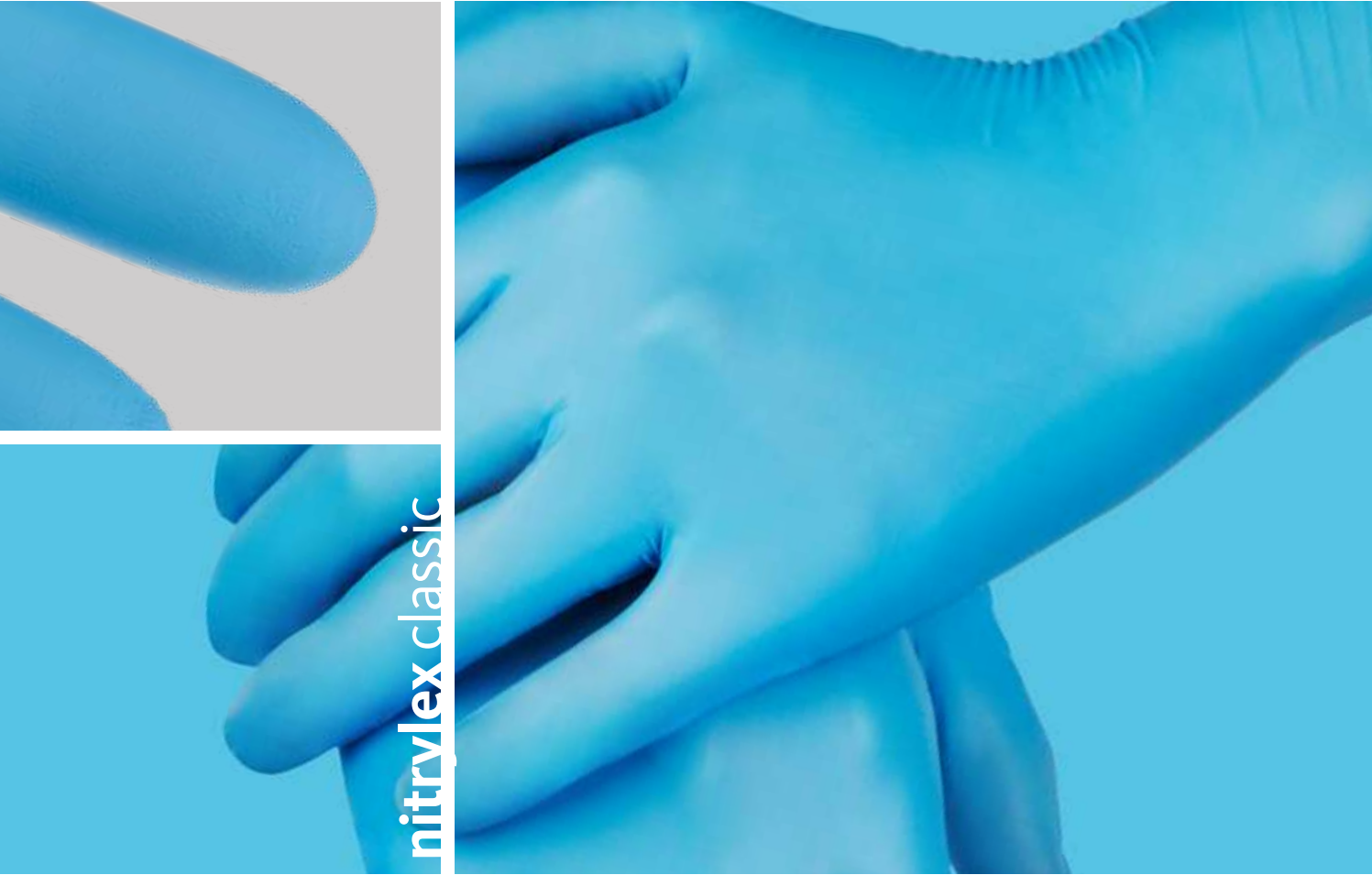

nitrylex classic



nitrylex high risk

03

GUANTI **SPECIALI**

Dedicati agli **esperti**



nitrylex one by one
nitrylex classic+
nitrylex complete
nitrylex high risk
ambulance high risk
nitrylex befee long



nitrilex one by one



Specifiche:

- REF** RD301240 01-05 - 200 pezzi
RD303330 01-05 - 50 pezzi
- Superficie esterna: **tessitura sulle punte delle dita**
- Azzuro**
- Imballaggio unitario: **200 pezzi / 50 pezzi**
Scatola (collettiva): **10 x 200 pezzi / 20 x 50 pezzi**
- In nitrile, senza polvere, monouso, non sterile.
Singolo prelievo dei guanti mediante il polsino.
- XS S M L XL** - 200 pezzi / 50 pezzi



LQA	1.0	
MD - dispositivo medico	classe I	
DPI - dispositivi di protezione individuale	Categoria III, tipo B	
Resistenza	batteri e funghi	✓
	virus	✓
	sostanze chimiche*	✓
	citostatici*	✓

* Leggere il rapporto di ricerca dettagliato

Aree di applicazione consigliate:



nitrilex classic+



Specifiche:

- REF** RD302460 02-05
- Superficie esterna: **tessitura sulle punte delle dita**
- Azzuro**
- Imballaggio unitario: **100 pezzi**
Scatola (collettiva): **10 x 100 pezzi**
- In nitrile, senza polvere, monouso, non sterile.
Parete rinforzata.
- S M L XL**



Aree di applicazione consigliate:



LQA	1.5	
MD - dispositivo medico	classe I	
DPI - dispositivi di protezione individuale	Categoria III, tipo B	
Resistenza	batteri e funghi	✓
	virus	✓
	sostanze chimiche*	✓
	citostatici*	✓

* Leggere il rapporto di ricerca dettagliato



nitrylex complete

Specifiche:

- REF

RD301020 01-05
- Superficie esterna: **tessitura sulle punte delle dita**
- Viola**
- Imballaggio unitario: **100 pezzi**
Scatola (collettiva): **10 x 100 pezzi**
- In nitrile, senza polvere, monouso, non sterile.
Possibilità di estrarre i guanti tramite il polsino.
Polsino esteso. Tecnologia rapid-don – indossabili facilmente in ambienti di lavoro umidi.
- XS

S

M

L

XL



LQA		1.0
MD - dispositivo medico		classe I
DPI - dispositivi di protezione individuale		Categoria III, tipo B
Resistenza	batteri e funghi	✓
	virus	✓
	sostanze chimiche*	✓
	citostatici*	✓

* Leggere il rapporto di ricerca dettagliato

Aree di applicazione consigliate:



nitrylex high risk

Specifiche:

- REF

RD300010 02-05
- Superficie esterna: **tessitura sulle punte delle dita**
- Arancione**
- Imballaggio unitario: **100 pezzi**
Scatola (collettiva): **10 x 100 pezzi**
- In nitrile, senza polvere, monouso, non sterile.
Utilizzati **nelle procedure ad alto rischio - paziente.**
2 volte più spessi dei guanti standard.
Polsino lungo e colore di segnalazione del pericolo.
- S

M

L

XL



LQA		1.0
MD - dispositivo medico		classe I
DPI - dispositivi di protezione individuale		Categoria III, tipo B
Resistenza	batteri e funghi	✓
	virus	✓
	sostanze chimiche*	✓
	citostatici*	✓

* Leggere il rapporto di ricerca dettagliato

Aree di applicazione consigliate:



ambulance high risk

Specifiche:

- REF

RD100110 02-05
- Superficie esterna: **strutturata**
- Blu scuro**
- Imballaggio unitario: **50 pezzi**
Scatola (collettiva): **10 x 50 pezzi**
- In lattice, senza polvere, monouso, non sterile.
Utilizzati **nelle procedure ad alto rischio - strumenti.**
3 volte più spessi dei guanti standard, **polsino lungo**.
- S

M

L

XL



LQA		1.0
MD - dispositivo medico		classe I
DPI - dispositivi di protezione individuale		Categoria III, tipo B
Resistenza	batteri e funghi	✓
	virus	✓
	sostanze chimiche*	✓
	citostatici*	✓

* Leggere il rapporto di ricerca dettagliato

Aree di applicazione consigliate:



nitrylex befree long

Specifiche:

- REF

RD302290 02-05
- Superficie esterna: **tessitura sulle punte delle dita**
- Azzuro**
- Imballaggio unitario: **100 pezzi**
Scatola (collettiva): **10 x 100 pezzi**

In nitrile, senza polvere, monouso, non sterile.
Dedicati alle persone con pelle sensibile alle proteine del lattice e agli acceleratori chimici. **Polsino lungo.**
Chemo risk – progettati per garantire protezione durante la somministrazione di farmaci citostatici. Prodotto socialmente responsabile – più alberi nell’ambiente naturale grazie agli utenti dei guanti nitrylex befree long.

-
- S

M

L

XL

LQA		1.0
MD - dispositivo medico		classe I
DPI - dispositivi di protezione individuale		Categoria III, tipo B
Resistenza	batteri e funghi	✓
	virus	✓
	sostanze chimiche*	✓
	citostatici*	✓

* Leggere il rapporto di ricerca dettagliato




Aree di applicazione consigliate:

- SOMMINISTRAZIONE
DI CITOSTATICI
- PER CHI SOFFRE
DI ALLERGIE
AL LATTICE E
AL NITRILE
- ASSISTENZA
A PAZIENTI
ALLETTATI
- PER LA PELLE
DELICATA DI
BAMBINI E ANZIANI
- STUDIO DI
TATUAGGI

nitrylex befree lungo

sono i guanti:

- senza polvere
- senza lattice
- senza acceleratori chimici

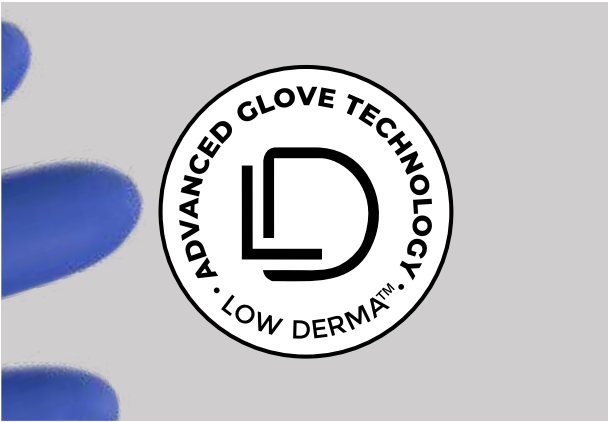

CONFERMATI
DA RICERCA

Dedicati alle persone con ipersensibilità di tipo I e IV dovuta all'uso di guanti.

STOP
ALLERGIE

Una soluzione brevettata per gli utenti più sensibili grazie alla tecnologia LOW DERMA™.

LEADER
DI TECNOLOGIA

Tecnologia brevettata per la produzione di guanti senza acceleratori chimici LOW DERMA™.



nitrylex pink

04

GUANTI COLORATI E SUPPORTI

Aiuto **nell'organizzazione
dell'ambiente di lavoro**



- nitrylex** black
- nitrylex** pink
- nitrylex** magenta
- nitrylex** white
- nitrylex** green
- nitrylex** orange

nitrylex black



Specifiche:

- REF

RD301040 01-05
- Superficie esterna: **texture sulle punte delle dita**
- Nero**
- Imballaggio unitario: **100 pezzi**
Scatola (collettiva): **10 x 100 pezzi**
- In nitrile, senza polvere, monouso, non sterile.
Colore nero opaco.
- XS

S

M

L

XL



LQA	1.5	
MD - dispositivo medico	classe I	
DPI - dispositivi di protezione individuale	Categoria III, tipo B	
Resistenza	batteri e funghi	✓
	virus	✓
	sostanze chimiche*	✓
	citostatici*	✗

* Leggere il rapporto di ricerca dettagliato

Aree di applicazione consigliate:



nitrylex pink



Specifiche:

- REF

RD301440 01-04
- Superficie esterna: **texture sulle punte delle dita**
- Rosa**
- Imballaggio unitario: **100 pezzi**
Scatola (collettiva): **10 x 100 pezzi**
- In nitrile, senza polvere, monouso, non sterile.
Rosa chiaro.
- XS

S

M

L



LQA	1.0	
MD - dispositivo medico	classe I	
DPI - dispositivi di protezione individuale	Categoria III, tipo B	
Resistenza	batteri e funghi	✓
	virus	✓
	sostanze chimiche*	✓
	citostatici*	✓

* Leggere il rapporto di ricerca dettagliato

Aree di applicazione consigliate:



nitrylex magenta



Specifiche:

- REF

RD303000 01-04
- Superficie esterna: **tessitura sulle punte delle dita**
- Magenta**
- Imballaggio unitario: **100 pezzi**
Scatola (collettiva): **10 x 100 pezzi**
- In nitrile, senza polvere, monouso, non sterile.
Colore magenta intenso.
- XS

S

M

L



LQA	1.5	
MD - dispositivo medico	classe I	
DPI - dispositivi di protezione individuale	Categoria III, tipo B	
Resistenza	batteri e funghi	✓
	virus	✓
	sostanze chimiche*	✓
	citostatici*	✓

* Leggere il rapporto di ricerca dettagliato

Aree di applicazione consigliate:



nitrylex white



Specifiche:

- REF

RD301430 01-05
- Superficie esterna: **texture sulle punte delle dita**
- Bianco**
- Imballaggio unitario: **100 pezzi**
Scatola (collettiva): **10 x 100 pezzi**
- In nitrile, senza polvere, monouso, non sterile.
Colore che favorisce l'igiene.
- XS

S

M

L

XL



LQA	1.5	
MD - dispositivo medico	classe I	
DPI - dispositivi di protezione individuale	Categoria III, tipo B	
Resistenza	batteri e funghi	✓
	virus	✓
	sostanze chimiche*	✓
	citostatici*	✓

* Leggere il rapporto di ricerca dettagliato

Aree di applicazione consigliate:



nitrylex green



Specifiche:

- REF

RD301380 01-05
- Superficie esterna: **tessitura sulle punte delle dita**
- Verde**
- Imballaggio unitario: **100 pezzi**
Scatola (collettiva): **10 x 100 pezzi**
- In nitrile, senza polvere, monouso, non sterile.
Guanti biodegradabili.
- XS

S

M

L

XL



LQA	1.5	
MD - dispositivo medico	classe I	
DPI - dispositivi di protezione individuale	Categoria III, tipo B	
Resistenza	batteri e funghi	✓
	virus	✓
	sostanze chimiche*	✓
	citostatici*	✓

* Leggere il rapporto di ricerca dettagliato

Aree di applicazione consigliate:



** Se il prodotto è stato utilizzato ed è entrato in contatto con fluidi corporei o sostanze infettive, deve essere smaltito come prodotto contaminato. Poiché il prodotto è realizzato in materiale biodegradabile, se non è stato utilizzato nei casi sopra descritti, può essere smaltito come rifiuto misto, gettandolo in un contenitore di colore nero. Sulla base di test effettuati da un laboratorio indipendente, il processo di biodegradazione raggiunge un indice del 79,40% dopo un periodo di 720 giorni.

nitrylex orange



Specifiche:

- REF

RD302390 02-05
- Superficie esterna: **texture sulle punte delle dita**
- Arancione**
- Imballaggio unitario: **100 pezzi**
Scatola (collettiva): **10 x 100 pezzi**
- In nitrile, senza polvere, monouso, non sterile.
Colore energetico.
- S

M

L

XL



LQA	1.5	
MD - dispositivo medico	classe I	
DPI - dispositivi di protezione individuale	Categoria III, tipo B	
Resistenza	batteri e funghi	✓
	virus	✓
	sostanze chimiche*	✓
	citostatici*	✓

* Leggere il rapporto di ricerca dettagliato

Aree di applicazione consigliate:



Il materiale non costituisce pubblicità ai sensi della legge sui dispositivi medici del 7 aprile 2022; si prega di non diffonderlo.



PORTAGANTI PROGETTATI PER SODDISFARE LE ESIGENZE DEGLI UTENTI

Per soddisfare le esigenze degli utenti di guanti che apprezzano la gestione ergonomica dello spazio di lavoro e il miglioramento degli standard igienici, abbiamo creato una gamma di supporti e cestini per guanti da esame.

I supporti devono essere montati a parete, consentendo così di risparmiare spazio sul piano di lavoro e facilitando al contempo l'estrazione dei guanti dalla confezione.

Caratteristiche dei nostri supporti:

- pratici,
- facili da montare,
- universali: si adattano alla maggior parte delle confezioni di guanti disponibili sul mercato,
- igienici: l'estrazione dei guanti senza dover toccare la confezione riduce significativamente il rischio di contaminazione.

RICHIAMO



I supporti a parete, utilizzati per **limitare la contaminazione delle confezioni di guanti**, contribuiscono a una **migliore organizzazione** del piano di lavoro.



Ampia scelta di supporti adatti alla maggior parte delle confezioni di guanti disponibili sul mercato.



Supporti di colore bianco realizzati **in filo di acciaio o plastica** in diverse varianti.



La struttura dei supporti **consente una facile pulizia e disinfezione** della loro superficie.



Supporti destinati **al montaggio con viti**.



I supporti con ganci facilitano **il fissaggio della confezione di guanti al letto del paziente (durante il trasporto) o al carrello operatorio**.

SUPPORTI METALLICI DI BASE

Supporti di colore bianco realizzati in filo di acciaio con piastra di montaggio.



	Supporto singolo / triplo	Supporto con possibilità di montaggio di ganci	Supporto per guida Modura
REF	KEUR001 / KEUR004	KEUR002	KEUR011
	acciaio	acciaio	acciaio
	• ricoperto di vernice antibatterica	• ganci per il supporto KEUR001, che consentono di utilizzare il supporto per il trasporto, • può essere appeso al letto o al carrello di trattamento, • ricoperto di vernice antibatterica	• non richiede montaggio o foratura, • può essere appeso a colonne mediche, • ricoperto di vernice antibatterica



SUPPORTI DI TIPO SAFE PACK

Supporti progettati per guanti da estrarre uno alla volta, confezionati con il sistema di dosaggio **SAFE PACK**. Compatibili con i guanti MERCATOR **nitrylex one by one**.




	Supporto SAFE PACK in plastica	Supporto SAFE PACK singolo / triplo	Supporto SAFE PACK per guida Modura
REF	KEUR010	KEUR007 / KEUR008	KEUR012
	plastica	acciaio	acciaio
	• supporto modulare - possibilità di combinare i supporti tra loro	• facile da mantenere, • ricoperto di vernice antibatterica	• non richiede montaggio o foratura, • può essere appeso a colonne mediche, • ricoperto di vernice antibatterica




IN THE
HANDS
OF **HEROES**



nitrylex
green

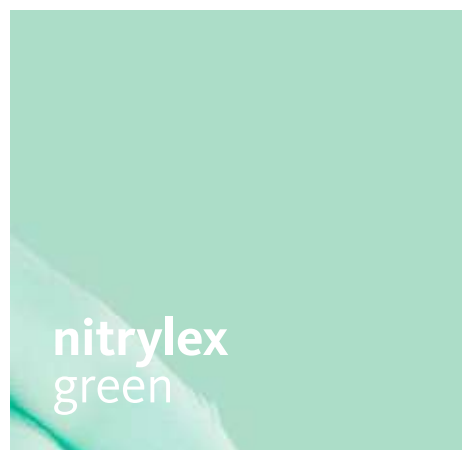

Indirizzo sociale:



MERCATOR MEDICAL S.A.
ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Cracovia, Polonia
NIP: 6771036424 • REGON: 350967107

Ufficio e indirizzo postale:



MERCATOR MEDICAL S.A.
ul. Fabryczna 1a (edificio B), 31-553 Cracovia, Polonia



Per saperne di più
www.mercatormedical.eu



Per ulteriori informazioni
scansionare il codice
con la fotocamera
dello smartphone